

GLIDER



Nouveau
code LPP
6274230


GLIDER

EASYSTAND

VERTICALISATION ACTIVE

En plein essor dans l'univers du cardio-training, l'elliptique permet de travailler sa capacité respiratoire et d'effectuer un entretien complet, en sollicitant de nombreux muscles sans à-coup. Le Glider vous apporte tout le maintien et confort nécessaires afin de pallier un éventuel manque de stabilité.

Sur l'Easystand Glider le travail est complet, vous êtes debout et vos bras peuvent exercer des mouvements de tractions et de poussées avec différents degrés de résistance sollicitant ainsi différents groupes musculaires en un seul mouvement. Le Glider comprend une paire de support-genoux escamotables pour faciliter votre transfert, des vérins avec un réglage de la résistance pour s'adapter à la force de chacun et une assise articulée pour ne pas gêner le mouvement et permettre un travail des hanches.

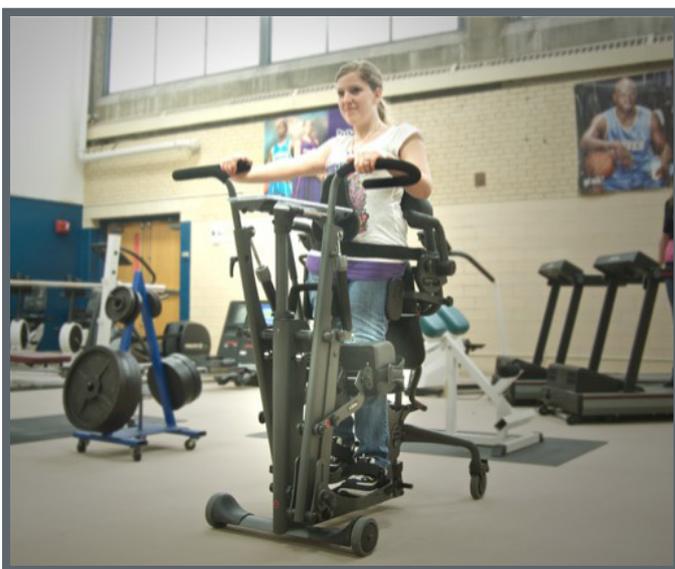

Sur le Glider, chaque pédale est reliée à une poignée. Vous êtes ainsi votre propre "chef d'orchestre" et effectuez un travail complet des muscles.

Caractéristiques techniques :

GLIDER



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Hauteur d'assise/repose-pieds : - à partir du pivot d'assise	38 à 46 cm
Hauteur d'assise :	55 cm
Plage de réglage de la profondeur du coussinet pectoral : - à partir du pivot d'assise	13 à 39 cm
Largeur du support-genoux : - à partir du pivot d'assise	25 cm
Embase cadre : - de roulette à roulette	67 x 104 cm
Poids :	78 kg
Dimension de tablette :	19 x 48 cm
Plage de réglage des poignées en hauteur : - à partir du pivot d'assise	62 à 85 cm (adulte moyen) 61 à 105 cm (adulte grand)

NOUVEAUX CODES LPP

Code LPP : 6274230	Appareil modulaire de verticalisation	363,74 €
Code LPP : 6274247	Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal	35,06 €
Code LPP : 6274253	Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes	18,45 €