


Raz-AT600

Fauteuil roulant manuel de douche percé bariatrique, équipement spécial pour handicapés. Poids maximal de 272 kg. Avec une bascule d'assise de 25°.

- WASS - voir page ci-contre
- 2 gammes de poids (158-204 kg / 204-272 kg)
- 25° d'inclinaison
- Largeurs : 56 cm / 61 cm / 66 cm / 71 cm / 76 cm.
- Angle du dossier réglable (90° / 97°)
- Châssis du dossier réglable en avant/arrière (plage de 3")
- Logement pelvien
- Réglable en hauteur
- Roulettes de 6" à double blocage
- Châssis en acier inoxydable

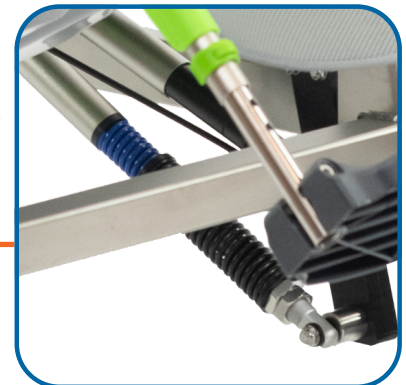

Système d'assistance par ressort (WASS)

Le WASS utilise une combinaison de vérins à gaz et de ressorts hélicoïdaux pour contrebalancer le poids de l'utilisateur, réduisant ainsi l'effort d'inclinaison. Contrairement aux systèmes alimentés par batterie, l'AT-600 n'a pas besoin d'être rechargé... il est toujours prêt à l'emploi !

La fonction d'inclinaison de la Raz-AT600 permet des transferts plus sûrs lors de l'utilisation d'un lève-personne mécanique. De plus, le fait d'avoir l'utilisateur sur une surface inclinée facilite le repositionnement.