


Raz-AT600

Fauteuil roulant manuel de douche percé bariatrique, équipement spécial pour handicapés. Poids maximal de 272 kg. Avec une bascule d'assise de 25°.



Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Châssis et composants en acier inoxydable, inclinaison de 25°, quatre roulettes de 6" (150 mm) à double verrouillage, accoudoirs relevables, repose-pieds renforcés, appui-tête avec petit coussin et système d'assistance avec ressort (WASS). Il comprend également un dossier multipositions réglable en tension, de 51 cm de haut avec une plage de réglage avant/arrière de 5 cm, deux angles de dossier (90°/97°). En exclusivité chez Raz, tous les sièges comprennent le système d'alignement ischio-pelvien [IPAS], qui permet un réglage avant/arrière de 5 cm. Poids maximum de l'utilisateur : 272 kg.

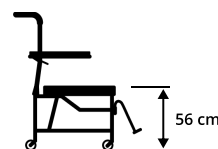

Caractéristiques techniques	Raz-AT600
Capacité de poids	272 Kg
Profondeur d'assise avec assise moulée	46 cm - 51 cm
Largeur totale	Largeur du siège plus 11 cm avec les accoudoirs standard
Largeur de passage des toilettes	43 cm
Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)	
- À 0° d'inclinaison avec les repose-pieds standards	107 cm
- À 25° d'inclinaison	132 cm
Hauteur libre (sous l'assise)	avec roulettes de 6"
- avec le supports du seau	45 cm - 47 cm
- sans le supports du seau	47 cm - 50 cm
Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulée	23,5 cm
Hauteur assise / sol (avec assise moulée)	56 cm
Hauteur du dossier	51 cm
Matériau	Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)
Poids du dispositif	38 Kg