


# Raz-ART



Fauteuil roulant manuel de douche percé avec bascule d'assise, équipement spécial pour handicapés. Géométrie d'inclinaison brevetée, sur une plage de 40°, système de verrouillage. Appui-tête avec petit coussin, cadre en aluminium réglable en hauteur sans outil, accoudoirs rembourrés et rabattables, repose-pieds, quatre roulettes de 5" (125 mm) à double verrouillage et seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur : 159 kg.

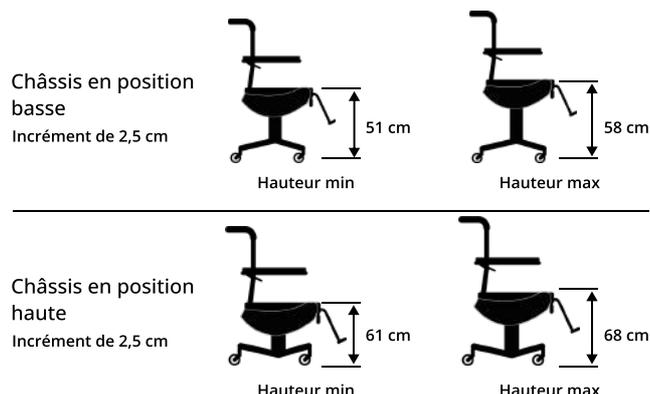

## Caractéristiques techniques

## Raz-Art

Capacité de poids

158 Kg

Largeur du châssis (assise et cadre de dossier)

46 cm

Largeur totale

56 cm

Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)

- À 0° d'inclinaison

89 cm

- À 40° d'inclinaison

127 cm

Profondeur d'assise

41 cm ou 53 cm selon la longueur de l'assise

Hauteur libre (sous le siège)

- avec le supports du seau

Plage inférieure : 38 cm - 46 cm    Plage supérieure : 48 cm - 56 cm

- sans le supports du seau

Plage inférieure : 39 cm - 47 cm    Plage supérieure : 49 cm - 57 cm

Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulé (incréments de 1/2")

- Dossier fixe de 46 cm de hauteur - standard

21 cm

- Dossier réglable de 38 cm de hauteur

14 cm - 21 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier réglable de 43 cm de hauteur

16 cm - 24 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier réglable de 51 cm de hauteur

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier réglable de 56 cm de hauteur

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

Hauteur assise / sol (avec assise moulé)

- plage inférieure

51 cm - 58 cm par incréments de 2,5 cm

- plage supérieure

61 cm - 68 cm par incréments de 2,5 cm

Poids du dispositif

31 Kg

Matériau du châssis de la base et du siège

Aluminium

Matériau du cadre de dossier et du repose-pieds

Acier inoxydable

Matériau des fixations

Acier inoxydable